



PRODUCT CATALOG



발치기구

4 Arastar

코아 포스트

6 Snow Post

7 Snow Light

7 Encore AF

Score Saddle Chair

8 Balance

8 Back Support

9 Medical 6311

9 Ergo Suppor(Microscope)

10 내 몸에 맞는 의자 찾기

인상재 및 Gun

14 S1 Putty

15 S2/S2i Regular Body

15 S3/S3i Heavy Body

16 S4/S4i Light Body

17 Alginelle

17 Bisico Gun & Adhesive

교합체크

18 Regidur-i

18 Bite Wax Sheet & Tab

격리재료

19 Contact Matrix

접착 및 에칭재료

20 Embrace Resin Cement

20 Porcelain Etch

수복재료

21 Embrace Pit & Fissure Sealant

21 Opaquer

Contents

어태치먼트

- 22 ERA OV System
- 22 ERA RV System
- 24 Hader Bar
- 25 EZ-Pick Up

Sand Blaster 및 집진기

- 26 Micro Etcher IIA
- 27 Aluminum Oxide
- 27 집진기

옴니백 및 Sheets

- 28 옴니백
- 28 Keystone Coping Sheet
- 29 Keystone Tray Sheet
- 29 Mouth Guard

연마 및 광택제

- 30 Stain Buster
- 30 Brite Powder

근관재료

- 31 Lime-Lite
- 31 Irrigation Tip
- 31 Centrix Needle Tip

진료용 일반재료

- 32 BESTiK
- 32 Richwil C&B Remover(Candy)
- 33 Instrument 컴파짓 조각도
- 33 확대경
- 34 보안경
- 35 Bitewing TABS
- 35 FG 330 Carbide Burs
- 36 Aidaco Bite Sticks
- 36 Bite Relator 2000
- 37 웰리스 공기제균청정기

Arastar

- 임플란트 식립 시 협측의 뼈 손상없이 발치
- Periotome과 Luxation 두 가지 동시 기능
- Luxation만 시켜도 쉽게 발치
- 깊게 파절 된 치아와 우식이 심한 치근에 아주 효과적
- 티타늄 코팅으로 내구성 증가



구성

- Dual Edge Type : A3, A4, A5
- Regular Type : A3S, A5S, A3C, A5C

제조원 : 아라텍/한국




Arastar 구성

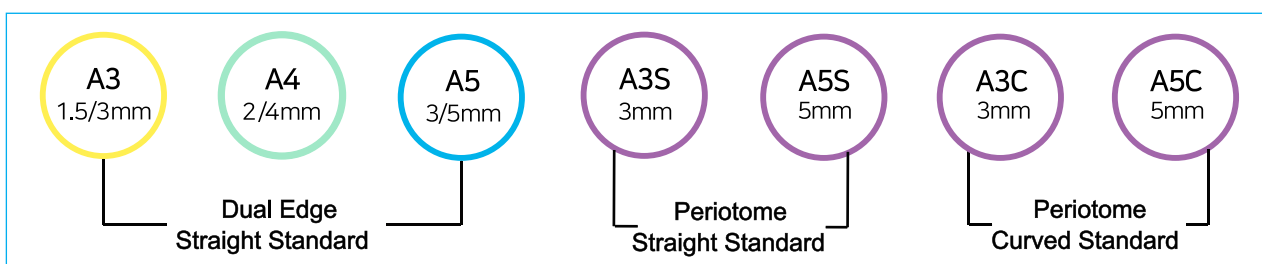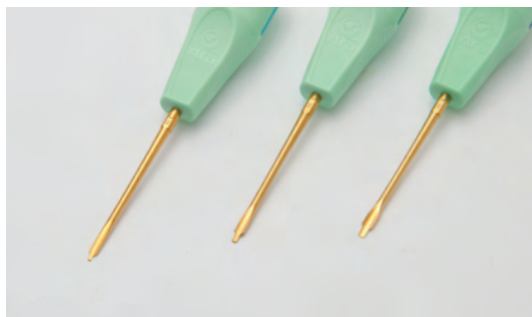


Arastar 사용방법

1. 시술준비

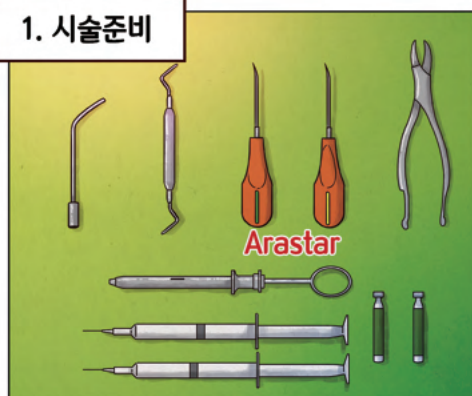

Arastar 삽입

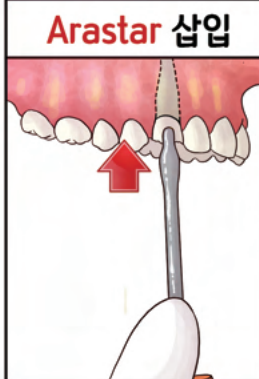

3. Arastar를 삽입한 후 치주인대 절단



4. 치주인대와 치아의 절단 성공



5. 발치 완료!




Snow Post

- 심미성을 극대화한 White, Radiopaque 섬유 강화형 Composite Post
- Zircon Glass Fiber 강도와 Epoxy Resin 함유로 탁월한 유연성
- Silane 표면처리로 코아재로나 모든 접착제와의 강화된 높은 결합력
- 덴틴 탄성율과 비슷하여 치아의 Crack, Fracture 및 스트레스 감소
- 자가중합 Type, 120 °C Autoclave


구성

- Snow Post Kit
(Post ϕ 1.0, ϕ 1.2, ϕ 1.4, ϕ 1.6 각 5개씩 + Drill 사이즈별 1개씩)
- Refill(Post 10개)


제조원 : Abrasive Tech., U.S.A.

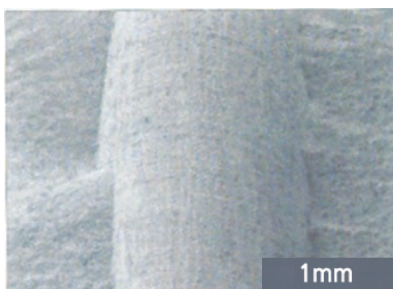

>

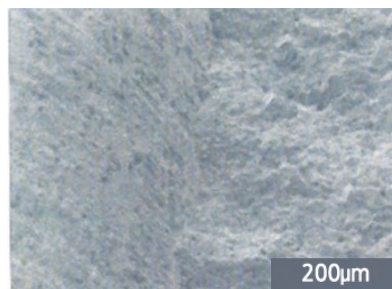

포스트와 덴틴과의 강력한 결합상태

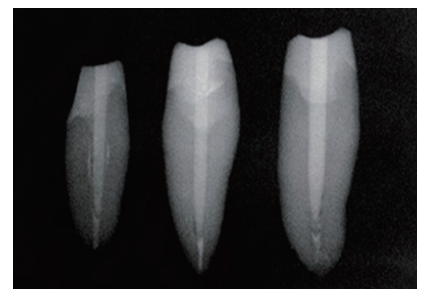

선명한 Radiopaque

Snow Light

- 최고의 심미성 White, Radiopaque Post
- Silane 표면처리로 코아재료 및 모든 접착제와의 높은 화학적 결합력
- Zirconia AR-Glass Fiber 함유로 더욱 높은 강도와 덴틴 탄성율과 비슷한 유연성
- 산성, 알칼리성 및 생물학적부식에 대한 저항성과 생리적스트레스 감소
- Dual Cure type, 135 °C Autoclave

구성

- Snow Light Kit
(Post ϕ 1.0, ϕ 1.2, ϕ 1.4, ϕ 1.6 각 5개씩 + Drill 사이즈별 1개씩)
- Refill(Post 10개)

제조원 : Abrasive Tech., U.S.A.




Encore AF Dentin 강도의 Core Build-Up 레진!

- 더욱 강화된 자가중합형 Composite Resin Core Build-UP 재료
- Non Slumping으로 매트릭스 불필요
- 인장강도, 압축강도 및 신축성이 아주 탁월
- Natural Color이며 방사선 불투과성

구성

- Base25g + Catalyst25g + 악세서리

제조원 : Centrix, U.S.A.

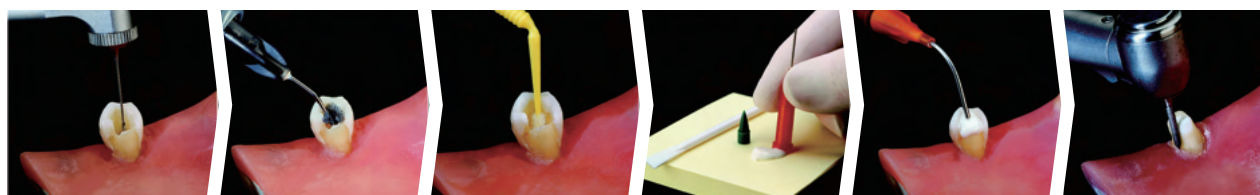

근관확대

에칭 및 세척

시멘트 적용

Encore AF 혼합
후 Tip에 주입

근관 내 주입

코아 형성

Balance

- 링을 회전시켜 움직임의 정도를 조절 가능
- 안장이 사용자의 움직임에 따라 미묘하게 같이 움직여 최대한의 편안함과 최적의 동적 작업 자세를 보장하는 메커니즘 → 근육과 척추에 유익한 효과
(추가 옵션 사항 “등받이” 선택 가능)



1. 키에 맞게 높이를 조절해줍니다



2. 발란스를 좌, 우 조절하여 바꿔줍니다



Back Support

- 요추 지지대(등받이)를 장착
- 요추 지지대(등받이)의 역할
: 쉽고 빠르게 사용자의 바른 자세를 유도, 진료 또는 작업하는 동안 허리(요추 부위)를 가볍게 지지해줌.
- 지지대를 조정하여 휴식 및 스트레칭이 가능 → 허리에 가해진 스트레스 해소
(추가 옵션 사항 “발판” 선택 가능)



Medical 6311

- 장시간 진료시 야기되는 허벅지 혈액순환의 침체를 막을수 있는 편안한 “Ergo Shape” 안장의 진료용 의자
- 기능적인 등받이의 높이와 각도를 쉽게 조절
(추가 옵션 사항 “발판” 선택 가능)



Ergo Support (Microscope)



- 진료용 현미경 사용자들을 위해서 특별히 개발된 의자.
- 몸 가까이 팔을 올려놓을 수 있어 등과 어깨의 긴장을 완화시켜 보다 편안한 진료가 가능
(추가 옵션 사항 “발판” 선택 가능)

추가 옵션 사항 1 등받이

- 허리를 지지해줌으로써 바른자세 유도



추가 옵션 사항 2 발판

- 진료시에 발판 버튼으로 상하 조절 가능



Score

적합한 의자 찾기

Score Saddle Chair는 두가지 독특한 시트 형태로 제공됩니다.



Amazone

안장 모양이 고관절 각도를 가장 많이 열 수 있도록 설계되었습니다.
좀 더 활동적이고 적극적인 자세를 유도해줍니다.



Jumper

안장이 넓어 열리는 고관절의 각도가 약간 더 작습니다.
점퍼는 아주 편안하고 안락한 착석감을 제공합니다.



SCORE SADDLE CHAIR

건강하게 앉는 방법

1 최적의 자세를 위해 골반을 앞으로 기울이고, 중립자세로 앉아주세요.

※ 중립자세란? 근육과 척추에 가해지는 부담을 최소화 하며, 135°로 열린 골반 각도가 최적입니다.

2 다음의 범위 내에서 올바른 자세를 유지하세요.



혁신적인 Score Saddle의 철학



- ✔ 앉은 자세 또는 서서 앉는 것
즉, 인체 공학적으로 유리한 자세로 적극적이고 편안하게!




- ✔ 자연스럽게 올바르게 앉은 자세로 등, 목 부상을 방지!
일반 의자는 제한된 골반각도만 가능하게 합니다.
그 결과 척추의 자연스러운 S자 형태를 유지하기가 매우 힘들어지며,
시간이 지나면 자동으로 구부러지게 됩니다.
Score Saddle Chair는 이러한 문제를 방지합니다.
또한, 안장의 독특한 모양과 높게 서서 앉는 자세는
골반이 앞으로 기울어질 때 엉덩이 각도(최대 140도)를 열어
자동으로 척추, 목, 머리를 건강한 수직정렬(중립자세)로 만들어 줍니다.



- ✔ 최적의 중립자세 유지!
무중력 환경에서 인체가 취하는 가장 편안한 자세로
NASA의 연구원들에 의해 입증되었습니다.
무중력 환경에서 모든 관절은 '중립자세'를 취하는데
그 자세가 바로 고관절이 '열린 자세'로
자세의 불균형 및 하지 정렬 개선에 효과가 있습니다.

출처 : NASA 1978'

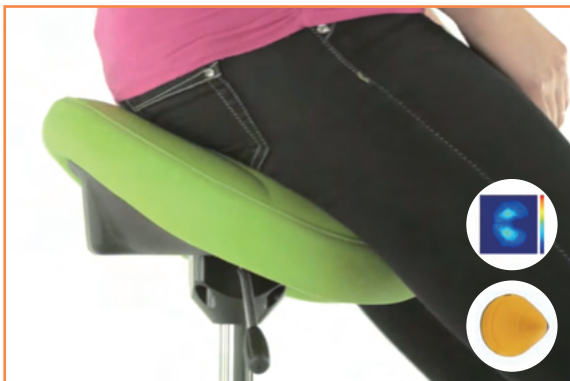

- ✔ 최대의 편안함을 위해
균형 잡힌 무게 분포를 입증한
압력측정!

가죽 설명 및 칼라 칩

Stamskin : 항균성, 세균번식을 억제하는 재질로 특유의 감촉을 느낄 수 있는 가죽소재



PUXX : 일반세제 및 소독제(알콜)로 닦을 수 있는 부드러운 감촉의 가죽소재



내 몸을 바꾸는 의자
Score Saddle Chair

“ Made In Netherlands ”

40년 이상의 경험과 노하우를 축적한 Saddle Chair가
정확하고 과학적인 ‘Seating Solution’을 제공해 드립니다!!

1977년부터 전문적인 의자를 제공하고 있으며,
전세계 수천명의 치과의사들이 환자 진료에 큰 도움을 주고 있습니다.



S1 Putty

- Super-Hydrophil 타입의 탁월한 친수성
- 최대 탄력성 및 찢김 저항성
- Two-Step용으로 아주 좋은 점도 유지
- 구강 내 경화시간 3분

구성

- Base300ml + Catalyst300ml


제조원 : Bisico, Germany



S1 활용법



Plicalfol Cut

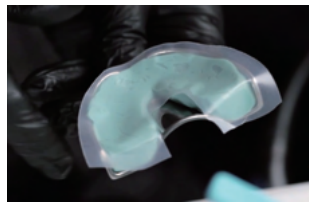

믹싱 후 Press



1차 인상(3분)




S4i(Light Body) 준비



Plicalfol 제거



S4i(Light Body) 적용

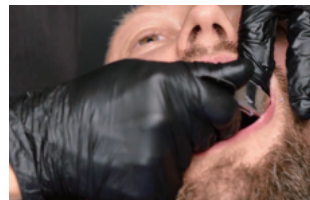

2차 인상(3분)



인상 완료

S2/S2i Regular Body

- 흐름성이 좋아 어떤 언더컷에서도 찢김 없이 정밀 인상채득
- 텍소트로픽 특성으로 마진부위가 아주 깨끗
- 구강 내 경화시간 3분

구성

- S2i (Gun 타입) 50ml x 6cartridges + 30mixing tips
- S2 (Tube 타입) 71.5ml(100g) x 2tubes

제조원 : Bisico, Germany



S3/S3i Heavy Body

- Tray용 재료의 최적의 점도
- Light Body와 함께 One-Step Tray용으로 사용
- 구강 내 경화시간 3분

제조원 : Bisico, Germany

구성

- S3i (Gun 타입) 75ml x 4cartridges + 20tips
- S3 (Tube 타입) 170ml(250g) x 2tubes




S4/S4i Light Body

- 텍소트로픽 함유로 지대치 적용 후 Air-Spray 불필요
- Super-Hydrophil Type으로 친수성이 높음
- 지대치 적용 후 흘러내림이 전혀 없어 상악이나 인레이, 미세 마진 부위에 아주 깨끗하게 채득
- 고탄력, 고강도로 인상체의 치수 안정성 보장
- 구강 내 경화시간 3분

구성

- S4i (Gun 타입) 50ml x 3cartridges + 15mixing tips + 5oral tips
- S4 (Tube 타입) 750ml(100g) x 2tubes

제조원 : Bisico, Germany

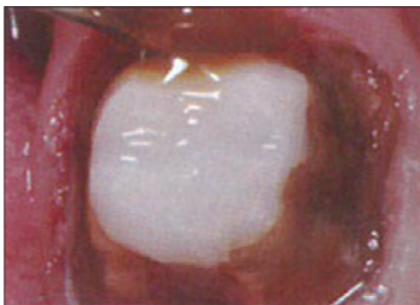

인상재 적용전



인상재 적용
(No drop)



인상재 채득후

Alginelle

- 텍소트로픽 함유로 정확한 인상채득 보장
- 고탄력성 및 특히 장기간 치수 안정성(168시간) 유지
- 구강 내 경화시간 30초
- 실리콘 느낌의 알지네이트 (입자 : 20micron)
- Dust Free


용도 : • 교정브라켓 • Study Model
 • 가철성&고정성 보철물 • 임시크라운&브릿지

구성

- 450g

제조원 : Lascod, S.p.A, Italy

Alginelle 사용방법

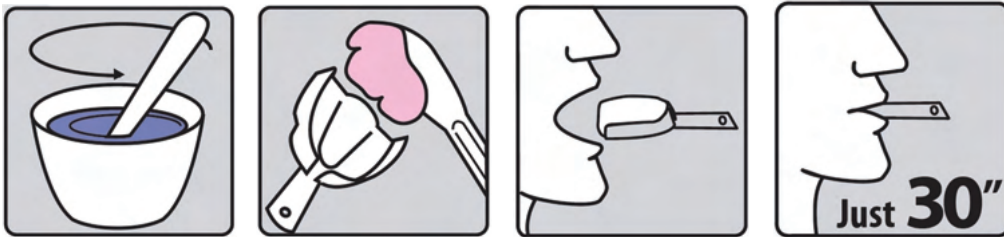

- ① 알지넬 믹싱하기
- ② 트레이에 담아주기
- ③ 인상채득
- ④ 입자가 실리콘 러버와 같기 때문에 마진채득이 정확하므로 언더컷이 적을 경우 러버로 대응가능.
단, 알지넬 인상체를 지대치에서 제거할 때 유의한다.
- ⑤ 인상체를 Zip-Rock 비닐봉지에 넣기(100시간 동안 무변형)

→ 모아서 한꺼번에 기공소에 보내기

Bisico Gun & Adhesive

구성

- Bisico Gun
- Adhesive(10g)

제조원 : Bisico, Germany



Regidur-i

- 교합면 또는 협측에 적용 가능
- 변형이 전혀 없는 초정밀 바이트체크 보장
- 최저 탄력성 및 최대 강도 유지
- 탁월한 안정성 및 찢김 저항성 유지
- 최대 수축률 0.1%이하
- 최종 Hardness : 90 shore A
- 구강내 경화시간 : 45초

구성

- 50ml x 3cartridges + 18tips

제조원 : Bisico, Germany




Bite Wax Sheet & Tab

- 바이트 체크 후 변형 없는 Hard Type
- Tab내에 장착된 알루미늄 호일로 인상채득 후 Tab분리 예방

구성

- Sheet : 17장
- Tab : 125개

제조원 : Almore International, U.S.A.

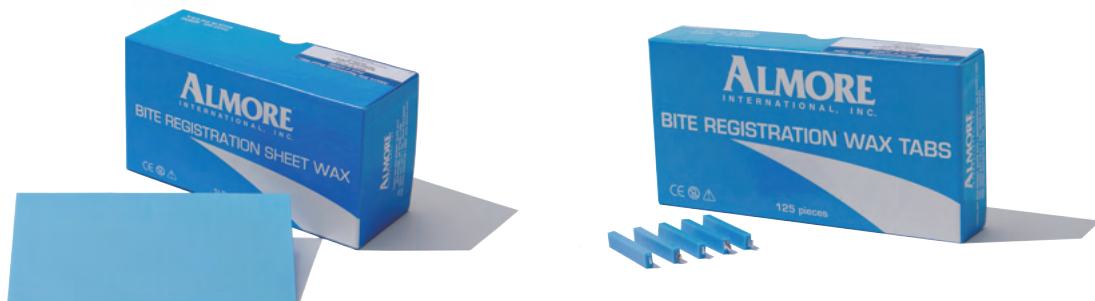

Contact Matrix

- 조작과정이 아주 빠르고 간편하여 진료시간을 단축
- 완벽한 Contact 형성과 외형조작 가능
- 구치부 인접면 처리에 효과적인 구조
- Ring의 15도 각도로 여러 개 겹쳐서 동시장착 가능
- 디지털 및 메지알측 2종류 (골드 및 메탈 칼라)

구성

- Contact Matrix Clinical Kit Plus
- Contact Matrix Clinical Kit
- Ring Refill(Silver 17개 + Gold 17개)
- Thin Bend(Small 0.5-100개/Large 0.7-100개)
- Subgingival(50개)
- Thick Bend(Small, Large 1.5-100개)
- Grip Forceps
- Ring Plier




제조원 : Danville Materials, U.S.A.

사용법



와동형성,
밴드 및 우드렛지 삽입

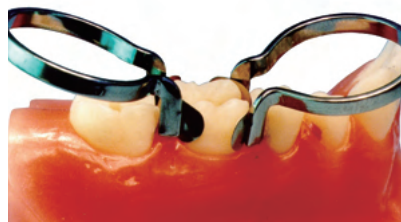

Ring 장착 후 컴파짓 또는 아말감 수복
(디지털 및 메지알측 장착)



동시에 여러 Ring 장착가능

임상사례



상악 14,16번 밴드 및
Ring 장착후 수복준비



하악 35번 밴드 및 Ring 장착 후
수복 준비



수복 완료

Embrace Resin Cement

- 수분 치면에 더욱 강력한 접착(Wet-Bond)
- Self-Etching(Dentin), Eliminates Microleakage
- 지각과민 Zero 및 가장 낮은 Film thickness(12um)
- 매우 쉬운 접착제 제거 및 조작


구성

- 7g x 2 syringes + 5 tips

제조원 : Pulpdent Corp, U.S.A.



치아삭제 및 세척

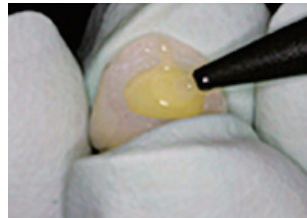

Cement 적용
(No Etching)



보철물 장착



시술 후

Porcelain Etch

- 텍소트로픽 성분으로 원하는 부위에만 정교하게 에칭
- Veneer, Inlay 및 파절된 포세린면에 아주 효과적
- 컴파짓면 또는 Resin Cement 등에 스테인 발생 안 됨
- 불소 9.6% 함유

구성

- 1.2ml x 4 syringes + 8 tips

제조원 : Pulpdent Corp, U.S.A.



Embrace Pit & Fissure Sealant

- 미국 CRA 「Product Guide」, 「Dentistry Today」, 저널 「Top 100」 등 유일하게 등재된 최고의 실란트!
- 최초로 미국 ADA 마크 획득!
- 수분상태에서 더욱 강력한 접착력
- 탁월한 Tooth Integrating 형성
- 친수성 Hydrophilic Resin 함유로 부드럽고 쉽게 Fissure 침투
- Margin Free! No Microleakage! No Drying!

구성

- 1.2ml x 4 + 20tips, etch 17개
- Shade : Natural, White

제조원: Pulpdent Corp, U.S.A.



에칭사용

실란트 적용

30초간 광중합

Opaquer

- 메탈, 스테인 등 변색치아 마스킹
- 균일한 밀도와 색상유지 및 아주 얇은 빠른 마스킹
- Direct나 Indirect Veneer 제작 시 하방 착색부분 제거

구성

- 1.2ml x 1syringes + 10tips
- Shade : Off White

제조원 : Pulpdent Corp, U.S.A.




Opaquer 적용 후
20초간 광중합

ERA Attachment


구성

- Attachment(PD & OD)용
- Female 1개
- Metal Housing Kit
- Metal Housing Refill 1개
- Offset Female(2.5mm/4.5mm)
- ERA Male Set(5개)

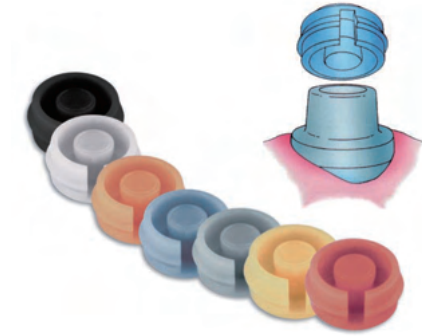


ERA Attchment(PD & OD)

- 기공작업이 아주 간단하고 유지력이 아주 강함
- 유지력에 따라 Male 선택 가능, 쉬운 교환(30초 소요)
- Resilience(0.4mm공간 제공)형으로 완압 역할
- Offset Female은 잇몸이 퇴축되었을 때 아주 효과적

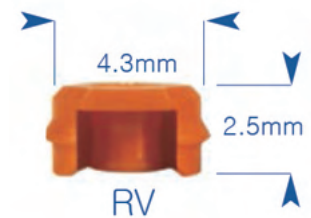

Micro ERA Attchment(PD & OD)

- Micro ERA는 기존의 ERA Attachment 타입보다 20% 축소형
- Micro ERA는 수직약간 거리나 협설 간 폭이 좁을 때 사용

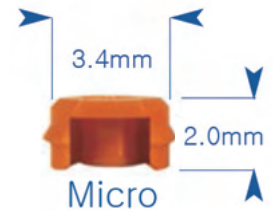

※ Metal Jacket의 역할은 완충작용을 통한 의치파절을 방지합니다!

ERA PD/OD System



PD Metal Housing Kit

완압 Attachment



OD Metal Housing Kit



PD Attachment Kit

비완압 Attachment



OD Attachment Kit

종류



Male 교환방법



메일 교환 순서



Hader Bar

- 아주 간단한 제작과정과 유지력에 따라 Rider 선택 가능
- 치주 건강도가 좋지 않을 때와 부분 무치악에 사용 가능
- 저작 시 지대치에 가해지는 측방압 감소와 교합압의 분산으로 지대치를 보호
- 잔존 자연치아의 수명을 연장


구성

- Hader Bar Kit
- Hader Bar Refill(형광 Green, 긴것, 6개)
- Hader 임시 Riders(Green, 기공용, 6개)
- Hader Riders(Yellow Clip, 6개)
(White, Red 6개)
- Hader Metal Housing(6개)
- Seating Tool(1개)

제조원 : Sterngold Dental LLC, U.S.A.



임상사진

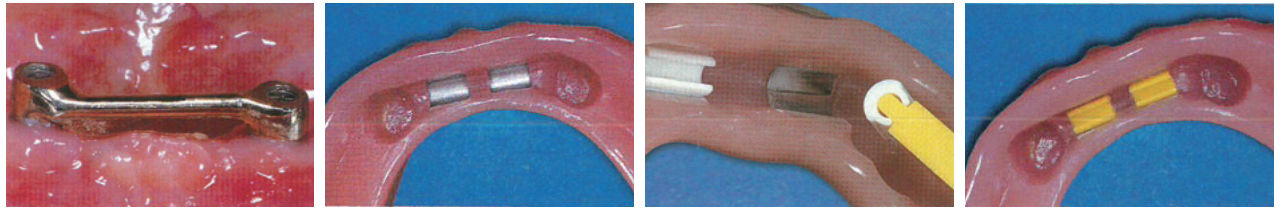


종류



Hader Bar Refill
(형광 Green)



Hader
Metal Housing

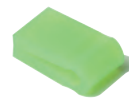

Hader 임시 Rider
(Green, 기공용)



Seating Tool

Rider 순서



White



Yellow



Red

EZ-Pick Up

- Self-Curing Acrylics의 가장 큰 단점인 구강 내 높은 수축율 1% 미만
- 경화 후 수축이 거의 없으므로 어태치먼트의 뒤틀림 방지
- 불쾌한 냄새와 맛, 열 발생이 전혀 없음
- 어태치먼트를 부분 의치나 총의치의 메탈 프레임에 연결할 때도 사용 가능

구성

- 15g x 1cartridge + 5ml bond + 15tips


제조원 : Sterngold Dental LLC, U.S.A.



사용방법



1. Varnish 적용(30초)

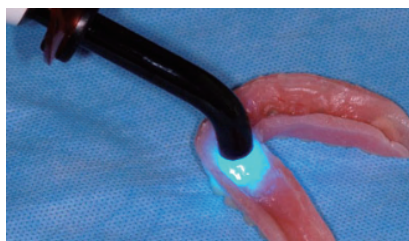

2. 광중합 10초




3. EZ-Pick up 적용



4. EZ-Pick up 적용(덴처)



5. 구강내 적용(2분 15초)

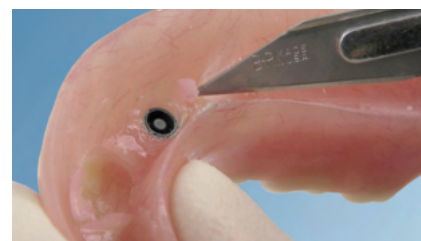

6. 잔여 EZ-Pick up 제거

Micro Etcher IIA

- 교정용 브라켓 표면에 아주 탁월
- 모든 표면에 Micro Roughing을 제공하여 보철물의 접착력 300~400% 증대
- Autoclave 가능(135℃)

사용영역

- 교정용 브라켓 표면처리
- 크라운 및 포스트
- Zirconia, Ceramic, Metal 표면처리
- 컴파짓 Repair

구성

- Micro Etcher IIA + Accessories



제조원 : Danville Materials, U.S.A.



보철물 표면처리



임플란트 내면처리




치아 표면처리




크라운 내면처리

처리 전 후 교정 브라켓

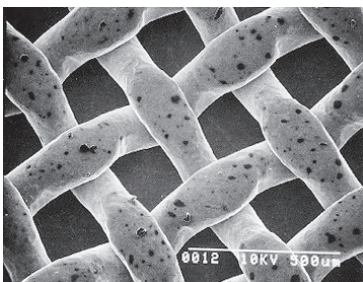

전

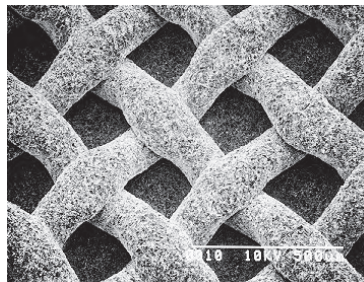

후

Sand Blaster 및 집진기



Aluminum Oxide

- 50 μ m : 에나멜, 컴파짓, 메탈 및 포세린 용
- 90 μ m : 보철물의 메탈내면 용

구성

- 450g

제조원 : Danville Materials, U.S.A.



집진기

- 50 μ m의 조밀한 필터로 초미세 입자까지 걸러줌
- 호흡기 질환 예방
- 병원에서 사용 시 최적화된 소음과 디자인
- 포터블형으로 간편한 이동
- 작업 중 발생하는 초미세 분진 제거 및 실내 청결 유지

(size : 32 x 25 x 18)

구성

- Macro Cab Plus

제조원 : Danville Materials, U.S.A.



옴니백

- 임시크라운 & 브릿지 제작
- 치아미백용 트레이 제작
- 교정용 스프린트 제작
- Mouth Guard 제작
- 임플란트용 스텐트 제작
- 개인용 트레이 제작
- 「U」자형이 아닌 열발생량 많은 「W」자형 열선
- 신속하고 짧은 시트 연화시간

구성

- ProForm Black(IV-220V)

제조원 : Keystone Industries, U.S.A.



Keystone Coping Sheet

- Die 제작 및 임시크라운, 브릿지 제작

구성

- 0.020 Coping Sheet(50장)
- 0.030 Coping Sheet(50장)

제조원 : Keystone Industries, U.S.A.




Keystone Tray Sheet

- 치아 미백용 Tray Sheet

구성

- 0.040 Soft Eva 1.0mm(25장)
- 0.060 Soft Eva 1.5mm(25장)
- 0.080 Soft Eva 2.0mm(25장)

제조원 : Keystone Industries, U.S.A.

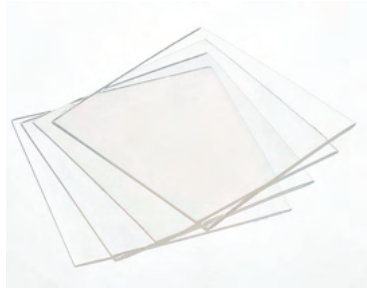

Mouth Guard

구성

- 0.060 Base Plate 1.5mm(25장)
- 0.080 Base Plate 2mm(25장)
- 0.125 Tray Material 3.2mm(25장)
- 0.160 Mouth Guard 4mm(25장)
(Clear, Red, Yellow, Blue 치아보호용)
- 삼색 Mouth Guard 4mm(12장)-치아보호용
- Liminate Night Guard 3mm(12장)-이갈이용
- Liminate Duals 3mm(12장) 코골이용
- E-Gasket 2mm(12장)-TMJ용

제조원 : Keystone Industries, U.S.A.



Stain Buster

- 교정 브라켓 제거 후, 임플란트 보철물 수복 후 잔여 시멘트 제거
- 컴파짓 수복물 연마 및 스테인, 임시 시멘트 등 착색 피막 제거에 효과적
- 에나멜 및 세라믹 등 연조직에 손상 없이 사용
- Zircon-Rich Fiberglass

구성

- Kit(2540 : 6pcs) - 2501, 2502, 2504, 2505, 2506, 4002
각 1개씩
- Refill(6pcs) : 2501, 2502, 2504, 2505, 2506, 4001, 4002

제조원 : Abrasive Tech., U.S.A.



〈 적용사례 〉



Brite Powder

- High Quality Prophylaxis Paste로 치면의 광택효과를 제공
- 에나멜에 전혀 손상 없음
- 물로 쉽게 제거

구성

20ml x 2jars + Accessories

제조원 : Pac-dent INC, U.S.A.



연마 및 광택제

Lime-Lite

- Calcium Hydroxylapatite를 함유한 인체친화적인 제품
- 불소방출, Radiopaque 및 불수용성
- Urethane Dimethacrylate Resin의 강화된 접착력
- Calcium, Hydroxylion, Phosphate ion방출로 높은 2차 덴틴 형성 촉진과 항우식성 향상
- 아주 단단하게 경화되는 광중합 치수복조제

Hydroxylapatite 란?

- 에나멜과 덴틴으로 혼합된 주요 무기물
- 치아와 뼈 속에 함유되어 더욱 인체친화적인 물질
- 뼈의 증식을 촉진하고 절개된 뼈를 채우는 필러로서 주로 사용

구성

- 1.2ml x 4syringes + 8tips

제조원 : Pulpdent Corp, U.S.A.




Irrigation Tip

- 가늘고 뛰어난 유연성
- Canal 어느 곳이든 쉽게 접근 가능
- 근관 내벽의 부유물 완전 세척 및 제거
- 아주 견고한 Needle

구성

- 23Ga(#238,20개) • 25Ga(#237,20개)
- 27Ga(#239,20개) • 30Ga(#232,20개)
- 27Ga(#224,20개) : Probe Type

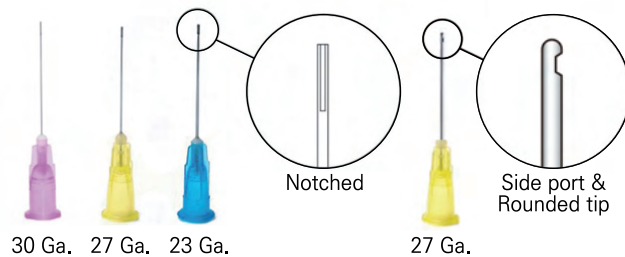

제조원 : Pac-dent INC, U.S.A.


Centrix Needle Tip

- 모든 종류의 복합재료, 시멘트, glass ionomer, 인상재 및 기타 유동성 제품에 적용 가능
- 모든 광중합 재료 보호 및 C-R주사기 / Gun과 호환

구성

- C/R Needle Tree Tripack(종합)
- C/R Accudose Needle Tip
- C/R Low Red Tip
- C/R Low Clear Tip

제조원 Centrix, INC. U.S.A.

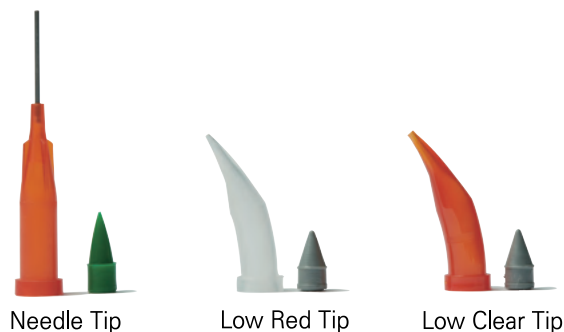

BESTiK

- Inlay, Onlay, Veneer 등 작은 재료들을 안전하고 쉽게 이동
- 팁의 건조방지를 위한 특수 디스펜스 사용
- 최상의 인체친화적인 재질로 제작

구성

- 50개

제조원 : 아라텍, 한국



Richwil C&B Remover(Candy)

- 접착력이 강하여 임시 및 영구 보철물(Onlay, Inlay, Crown 등)을 흠집없이 쉽게 제거

사용방법

- ① 60~70°C 물에 넣어 겔 타입으로 녹여 제거할 보철물에 겔을 위치시켜 다물게 합니다.
- ② 찬물 스프레이로 겔을 단단하게 한 후 순간적으로 상,하악을 벌리게 합니다.
(개봉 안 된 제품은 항상 냉장 보관하시기 바랍니다.)

***주의사항 : 냉장보관**

구성

- 50개

제조원 : Almore International, U.S.A.

보철물 분리 전 후



Instrument 컴파짓 조각도

- 다이에스티마 등에 사용할 경우 컴파짓이 기구에 달라붙지 않음
- 종류가 다양하며 부드럽고 유연하여 모든 부위의 컴파짓 조작 가능

① Gold Color



- 상악 전치의 facial면과 구치의 협측과 gumline의 마진형성
- 설측 concavity의 형성과 gumline이나 lingual 측의 Interproximal 형성

② Green Color



- 상악 전치의 facial면과 구치의 협측 또는 치면이 크고 라운드한 곳에 사용
- Gumline의 마진 형성과 치아 인접면 쪽의 완만한 굴곡형성
- 완만한 굴곡의 설측 concavity의 조작과 gumline이나 lingual 측의 interproximal 형성

③ Blue Color




- Taper한 cutting edge는 특히 잇몸이나 인접면간의 마진쪽 컴파짓을 트리밍
- 그 반대쪽은 인접면간의 잇몸 마진형성과 트리밍에 아주 효과적

구성

Instrument Kit(조각도 3개)

Refill(조각도 1개)

제조원 : Safident-DS, Spain

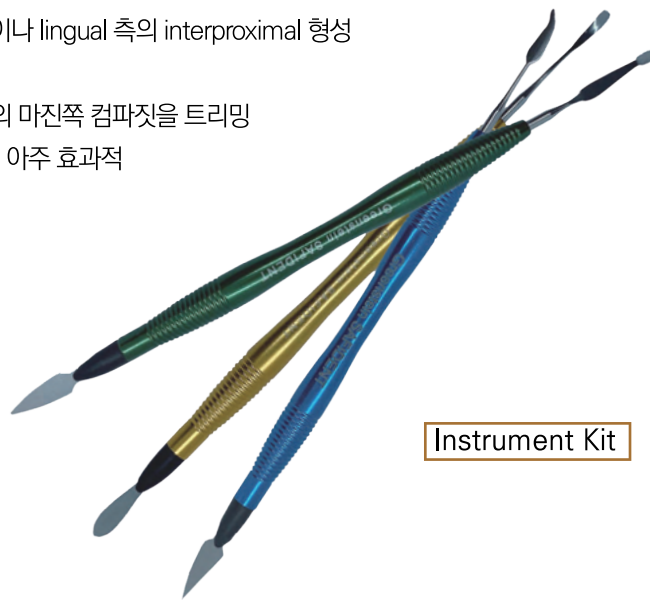

Instrument Kit


확대경

- 진료부위 정밀 확대
- 클립형으로 간편하게 사용

구성

- 확대경(1.75배/2.25배)

제조원 : Almore International, U.S.A.

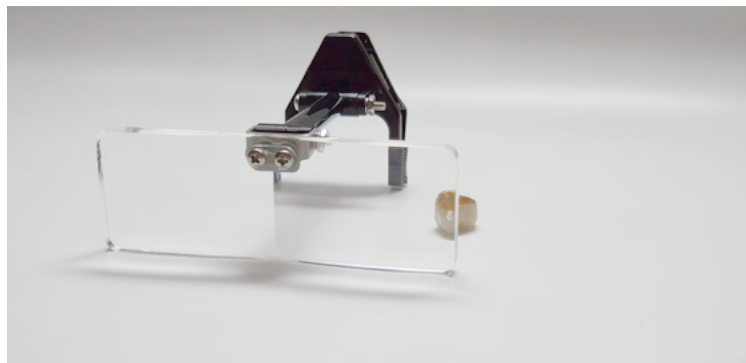

보안경

- No Foggy !
- 표면에 서리가 안 생김
- 치아삭제 및 진료 시
- 광중합 시 눈 보호

구성

- 보안경(Clear)
- 보안경(Curing)

제조원 : Plasdent, U.S.A.

**하니웰 보안경은
편안하고 성능이 뛰어난
세계최고의 아이웨어 브랜드입니다.**



보안경(Clear)



보안경(Curing)



길이 조절 가능



안경점착용 가능



탁월한 김서림 방지



Bitewing TABS

- 쉽게 열고 신속하게 삽입이 가능
- TAB Style 디스펜서

구성

- 50개

제조원 : Temrex Corp. U.S.A.



FG 330 Carbide Burs

- 빠르고 부드럽게 삭제
- 강력한 삭제력과 내구성

구성

- 10개

제조원 : Pac-dent INC, U.S.A.



Aidaco Bite Sticks

- 최적의 탄력성을 위한 소나무 소재 스틱
- 스틱은 다용도를 위해 한쪽은 사각형, 다른 한쪽은 원형으로 제작
- 길이 : 2Inch

구성

- 80개

제조원 : Temrex Corp, U.S.A.



Bite Relator 2000

- 변형이 전혀 없는 정밀한 인상채득 보장
- 사랑니가 없는 경우 매우 효과적
- Autoclave 가능

구성

- Bite Relator 2000 : Tray(1) + Gauze(12)
- Bite Relator Gauze 100장

제조원 : Temrex Corp, U.S.A.



Wellis 공기제균청정기

공기제균청정기란?

공기제균청정기는 이산화탄소나 미세먼지 뿐만 아니라 공기중에 떠다니는 **세균, 박테리아, 바이러스를 파괴**하는 데에 큰 효과를 보이는 제품.

장점

- 인체에 무해한 OH(수산기)를 이용하여 세균 및 박테리아, 바이러스를 파괴
- 최대 30평까지 사용가능(개방된 공간 일 경우)
- OH카트리지를 교체 방식으로 사용(평균 교체시기 3달)
- 천연오렌지향
- 최상의 에너지 효율

치과병원 전지역 판매처


웰리스 상세내용은 코덴 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
www.koden.co.kr ▶ 이달의 코덴 특가



OH(하이드록실 라디칼)이란?

OH(하이드록실 라디칼)는 태양의 빛, 대기의 오존, 공기 중의 수분으로부터 자연 생성되는 천연정화물질로 강한 제균력을 가지고 있으며 다른 오염 물질과 함께 소멸되어 인체에 무해합니다.

OH(하이드록실 라디칼)가 어떻게 제균을 하나요?

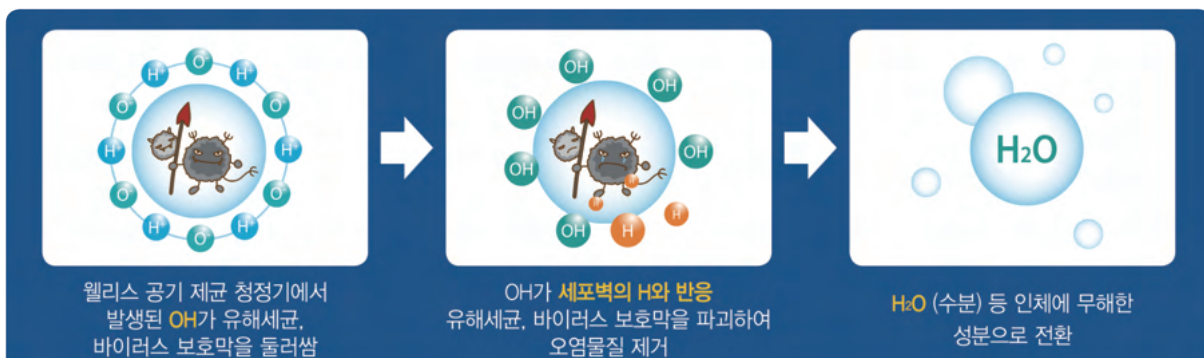

99.9%

바이러스, 세균, 곰팡이 등 유해 성분 최대 99.9% 제거!
자연의 대기정화 원리를 응용하여 친환경적인 자연 정화 물질로
오염물질을 정화!

MEMO



MEMO

